

## Garantía

Vellass garantiza que su producto funcionará correctamente durante el periodo de garantía (un año desde la fecha de compra). En caso de que estuviera defectuoso durante el periodo de garantía, se proporcionará un servicio de reparación del equipo de forma gratuita.

El servicio gratuito de Vellass se ofrecerá sólo tras la presentación de la tarjeta de garantía junto con la factura o recibo original emitido al cliente por el comercio, y si la tarjeta de garantía indica (a) el nombre del comprador, (b) el nombre y la dirección del comercio, (c) el nombre del modelo, si existiera, del producto adquirido y (d) la fecha de compra del producto. Vellass se reserva el derecho a denegar el servicio de garantía si esta información no está completa o ha sido eliminada o modificada tras la compra original del producto del cliente al comercio. Vellass también se reserva el derecho a reemplazar el producto defectuoso por otro producto equivalente que tenga la misma calidad o similar que el producto defectuoso, en lugar de reparar el producto defectuoso.

## Certificado de autenticidad

Nombre del producto	Pengu	Nombre del modelo	LipoLaser 1x
Fecha de fabricación		Número de licencia del objeto	CE
Número de fabricación		Peso	110g
Fecha de compra		Unidad de empaquetado	1EA/BOX

Por favor, contacte con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través de: [info@vellass.es](mailto:info@vellass.es)

# pengü

## Manual de usuario



# pengü

Gracias por elegir Pengu LipoLaser. Antes de utilizar Pengu por primera vez, le agradecemos que lea el Manual de Usuario en su totalidad.

Le recomendamos que vuelva a revisar el Manual de Usuario cada vez que utilice Pengu.


## Características técnicas del producto

Características técnicas	Rendimiento
Corriente de entrada	110~220V / 60Hz
Corriente de salida	DC 5V 500mA
Consumo de energía	4.5W
Tipo de Laser	CLASS 3B / III b
Sistema de entrada	Láser de diodo / Vibrador
Longitud de onda	635nm
Salida	4mW/cm <sup>2</sup> / 1.55W
Tiempo	20min
Modo operación	1,2,3 Hz
Tamaño(L*W*H)	200*40*60
Peso	250g

## Cargar el dispositivo

1. Pengu deberá cargarse cuando el indicador azul se ilumine intermitentemente
2. Para cargar Pengu conecte el cable de carga USB
3. Una luz azul estable indicará que Pengu se ha cargado completamente

## Your Pengu

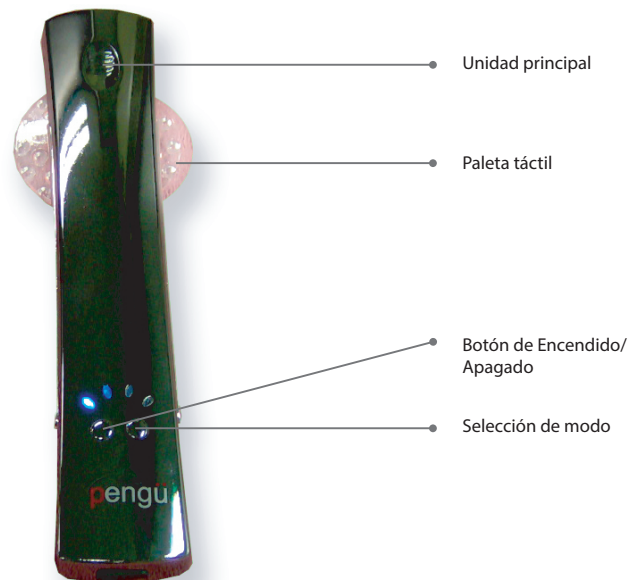

## Características de Pengu

1. Pengu utiliza un láser frío de 635nm para ayudar a reducir el tamaño de las células de grasa
2. Pengu tiene una característica de vibración especial para mejorar la circulación y reducir el tiempo de recuperación
3. El dispositivo es portátil y puede cargarse en cualquier lugar con USB
4. Pengu posee varios modos de vibración para su comodidad
5. Pengu puede producir rápidos resultados con poco tiempo de recuperación


## Objetos incluidos



Crema activadora



Cargador USB

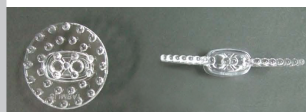

Paletas táctiles

# Índice

## Precauciones:

- Antes de usar
- Durante su utilización
- Después de usar

## Cómo utilizar Pengu

## Características de Pengu

Objetos incluidos

## Cargar

## Garantía

# PRECAUCIONES

## ¿Quién no debería utilizar Pengu?

- Niños menores de 18 años
- Mujeres embarazadas o que pretendan quedarse embarazadas
- Si lleva un marcapasos o un dispositivo médico similar
- Pengu puede ser menos efectivo en personas que sufren diabetes u otros desórdenes tiroideos
- Si no está seguro de si usted debe utilizar Pengu, por favor, consulte a su médico

### Antes de usar

- Asegúrese de que el dispositivo está completamente cargado
- Inspeccione el dispositivo para asegurarse de que no se ha dañado físicamente
- Asegúrese de que todos los accesorios están correctamente conectados

### Durante su utilización

- No mire a la luz del láser
- No utilice Pengu en entornos húmedos o mojados
- No lo utilice conjuntamente con otro dispositivo láser o terapias de radiofrecuencia
- No utilizar más de 30 minutos en cada zona de tratamiento
- Evitar tratar zonas sensibles como el rostro, cuello o genitales
- No utilice el producto de forma inadecuada

### Después de usar

- Mantenga Pengu lejos del alcance de los niños
- Guárdelo en un lugar frío y seco
- Desinfecte todas sus partes con un paño húmedo tras cada utilización
- Nunca intente reparar Pengu usted sólo, llame a Atención al Cliente


# Cómo utilizar Pengu

Pengu es un sistema no invasivo de modelado del cuerpo mediante láser, que ofrece la relajación de un masaje con la posibilidad de perder centímetros y reducir la celulitis.

Pengu debe utilizarse 2-3 veces a la semana en cada zona de tratamiento durante al menos 4 ó 6 semanas. Se considera una zona de tratamiento para una persona promedio a las siguientes: abdomen, espalda, pecho, brazos, piernas/muslos o nalgas.



1 Extender la Crema de Activación Pengu en la zona que desea tratar. Asegúrese de extender la crema de

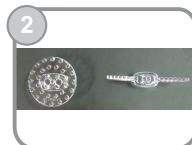

2 Inserte la paleta táctil deseada en el dispositivo principal  
- Utilice la paleta circular para zonas de tratamiento pequeñas  
- Utilice la paleta alargada para zonas de tratamiento más grandes



3 **ON** Pulse el botón de encendido/apagado hasta que la luz azul sea estable

**MODE** Seleccione el modo de vibración deseado



4 Aplicar durante 20-30 minutos por zona de tratamiento realizando movimientos circulares (paleta circular) o laterales (paleta grande).



5 **OFF** Cuando haya terminado el tratamiento, pulse el botón de encendido/apagado