

VELLASS

APARATOLOGIA DE USO DOMESTICO Y ESTETICA



Dos
Pilas
LR03 (AAA)

KD8900



Dos
Pilas
LR03 (AAA)

KD8901



ELIMINA LAS ARRUGAS DEL CONTORNO DE OJOS

Elimina las patas de gallo • Elimina las ojeras • Elimina las bolsas

KD8900/8901

SOFT - LASER + MICRO - CORRIENTE = EFICAZ PARA ELIMINAR LAS PATAS DE GALLO

ÍNDICE

| | |
|--|---|
| I. Definiciones..... | 1 |
| II. Principios operativos..... | 2 |
| III. Funciones..... | 3 |
| IV. Nombres y funciones de las piezas..... | 4 |
| V. Modo de empleo..... | 5 |
| VI. Métodos de mantenimientos después del uso..... | 7 |
| VII. Advertencias..... | 9 |

VII. Advertencias

- No use este aparato si está embarazada.
- No use este aparato durante la menstruación.
- No corte, estropee ni modifique el cable. No tire ni retuerza el cable con fuerza innecesariamente. No enrolle el cable alrededor del aparato. Podría provocar incendios y/o descargas eléctricas. Si el cable se deteriora o se calienta, deje de usarlo inmediatamente.
- No use la unidad cerca de materiales inflamables como gasolina, disolventes, aerosoles, etc. Podría provocar explosiones o incendios.
- No use el aparato con las manos mojadas, sólo con las manos secas. Podría provocar descargas eléctricas y/o cortocircuitos.
- Mantenga la unidad fuera del alcance de los niños.
- No use disolventes, gasolina ni ningún otro producto diluyente para limpiar la unidad, ya que podría estropearla.

- Saque las pilas del aparato cuando no vaya a usarlo durante mucho tiempo (más de 1 mes).
- No coloque el aparato en lugares con temperaturas o humedad altas o humedad elevada.
- Mantenga el aparato lejos de objetos peligrosos, como un cúter.

En caso de avería, consulte las siguientes soluciones para resolver problemas.

| Fallos | Soluciones |
|--|--|
| El indicador no se enciende y la función output no está disponible. | Compruebe las pilas y cámbielas si es necesario. |
| El indicador de modo está encendido, pero el aparato no funciona. | Compruebe que la tabla de contacto digital esté en contacto. Compruebe que ha aplicado suficiente gel (acuoso) alrededor de los ojos. |
| Siente pinchazos en la piel o se produce algún otro problema durante el uso. | Compruebe si ha usado maquillaje con base aceitosa. Compruebe si se debe a problemas de salud o de constitución. Deje de usar el producto inmediatamente. Si no puede resolver el problema conforme a las soluciones anteriores, póngase en contacto con nuestro distribuidor |

I. Definiciones

Láser de baja energía:


En los últimos diez años, una serie de publicaciones médicas han analizado y reconocido las propiedades de la radiación de láser de baja potencia. Los estudios demuestran que el láser puede actuar sobre el sistema inmune generando funciones de ajuste de la inmunidad mediante distintos métodos de radiación (incluyendo la radiación externa en el cuerpo humano y en los vasos sanguíneos) y distinta longitud de onda (incluyendo láser visible e infrarrojos).

El aparato láser para eliminar las arrugas del contorno de ojos introduce en su piel un láser nutritivo para darle un aspecto más sano y resplandeciente. Sus células siempre responden a la luz. El ejemplo más común es la fotosíntesis, mediante la cual la energía solar se convierte en energía química. Durante el proceso, las plantas producen energía química gracias a la radiación de la luz solar.


Micro-corriente cosmética:

En el cuerpo humano, el crecimiento, metabolismo, multiplicación y división celular depende de las micro-corrientes. Sin embargo, a medida que envejecemos, las micro-corrientes biológicas generadas por el cuerpo pueden descender, provocando la falta de una corriente equilibrada de flujo en las células de la piel y la aparición de arrugas, flaccidez y piel apagada debido a la ralentización del metabolismo y otros problemas cutáneos.

La micro-corriente liberada por el aparato permite ajustar el equilibrio celular y complementar las cargas.

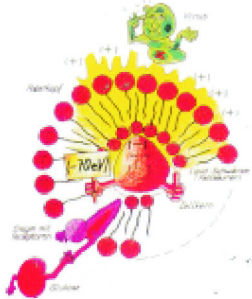

Si el equilibrio celular es normal (es decir, si se alcanza una corriente de campo de 0,07V como se muestra en la figura), el metabolismo es normal y las sustancias nocivas no pueden penetrar en las células. En esta situación, las células están saturadas y normales.

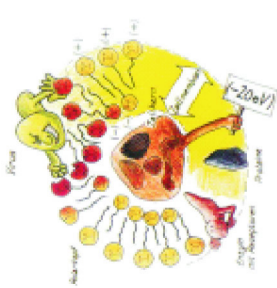

Si las células no están equilibradas (por ejemplo, la corriente de campo sólo llega a 0,02V como se muestra en la figura), el metabolismo no puede desarrollarse adecuadamente y las células envejecerán y se secarán bajo el impacto de sustancias nocivas externas.

II. Principios operativos

El láser de baja potencia está compuesto de luz roja de láser electromagnético a una temperatura bajo cero. Difiere de la luz natural y tiene un color preciso. Es coherente (es decir, rota a lo largo de una línea recta) y monocromático (una forma de onda) y puede alcanzar el zénit (es decir, la luz converge hacia un centro). Con dichas características, puede penetrar en los objetos sin calentarlos, por lo que no provoca efectos nocivos ni secundarios.



3. Levante el canto externo.



4. Presione suavemente desde el punto de acupuntura Jingming a lo largo del canto externo inferior.



5. Empuje y levante desde la mitad de la ceja hasta el extremo de la misma.

(3) Advertencia

- Se recomienda usar el aparato dos o tres veces a la semana, no más de una vez al día. Puede usarse en cualquier lugar excepto membranas mucosas, ojos, orejas y garganta.
- Permite usar dos funciones al mismo tiempo.
- Debe aplicar un gel ocular al usar el aparato.

VI. Métodos de mantenimiento después del uso


Métodos de mantenimiento:

- Limpie el aparato suavemente con un paño húmedo o algodón cosmético ligeramente empapado de agua fría o templada.
- No limpie el aparato con agua, ya que su intrusión podría provocar averías.
- No limpie el aparato con alcohol, detergente, disolventes ácidos o alcalinos ni sustancias con gasolina.


- (1) Acupuntos abiertos: Procure que la lámpara del láser y la micro-corriente BIO irradien sobre los seis acupuntos del contorno de ojos (Zanzhu, Sizhukong, Jingming, Yuyao, Tongziliao y Chengqi), cinco segundos para cada uno, durante 1 minuto en total.

Durante dicha operación, deje que el cabezal del láser permanezca próximo a la piel del contorno de ojos, de forma que la micro-corriente pueda actuar sobre la piel.

- (2) Fases operativas del cuidado ocular:
Estire la piel manteniéndola en contacto con la corriente del láser en las direcciones que aparecen en la figura, tres veces para cada acción, con un intervalo de 10 segundos. Las bolsas se estirarán, el canto se elevará y las ojeras desaparecerán.

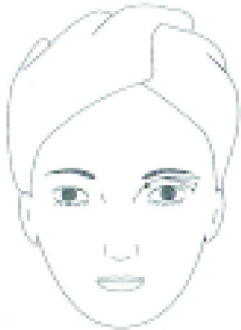

1. Tire hacia arriba desde el extremo De la ceja hacia el acupunto Qiuhou.

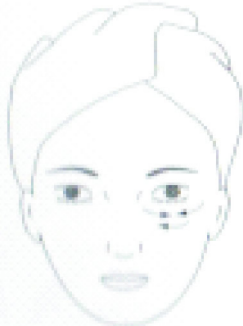

2. Presione a lo largo del párpado inferior.

III. Funciones

1. Funciones del láser y la micro-corriente. Si usa el producto una o dos veces a la semana durante 5-10 minutos, su piel estará elástica y resplandeciente y observará una reducción evidente de sus patas de gallo pasadas 3 semanas. Tras 3 meses de uso, el 40-60% de sus arrugas desaparecerán.



• Elimina las arrugas del contorno de ojos



Mediante la acción y radiación del láser de baja potencia y la micro-corriente sobre la piel, los músculos cutáneos se irradian para aumentar la tensión de la piel. La irradiación eléctrica penetra en los músculos en profundidad a través de los tejidos subcutáneos, lo que contribuye a reparar y tratar las fibras elásticas y los tejidos cutáneos, alisando y reduciendo las arrugas.

• Elimina problemas

El uso de este producto acelera la circulación sanguínea de los capilares, mejora la permeabilidad celular y garantiza un suministro nutritivo eficaz en tejidos musculares y piel. El uso frecuente le permite al láser absorber y descomponer los pigmentos oculares. Los iones eléctricos pueden penetrar en la piel en profundidad y complementar la hidratación cutánea, permitiendo recuperar una piel hidratada, suave y aterciopelada.

III. Funciones


- ① Contacto de energía
- ② Botón Micro-corriente BIO
- ③ Botón del láser
- ④ Indicador de encendido
- ⑤ Botón de intensidad de corriente
- ⑥ Cabezal del láser
- ⑦ Anillo de contacto de la micro-corriente
- ⑧ Compartimento para pilas

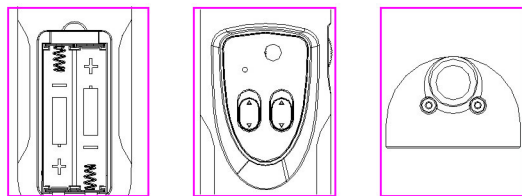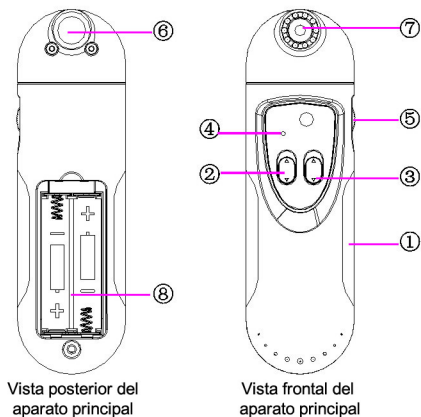

paquete de pilas botones de funcionamiento cabezal láser

V. MODO DE EMPLEO

1. Antes de iniciar el tratamiento, limpie su piel del modo habitual para retirar el maquillaje y limpiar el rostro. Use el producto con la piel limpia.
2. Elija una loción nutritiva adecuada para su piel. Aplique dicha loción uniformemente sobre el rostro antes de iniciar el tratamiento. Si nota la piel seca durante el tratamiento, aplique más loción.
3. Empiece a usar el aparato para eliminar las arrugas del contorno de ojos:
 - (1) Coloque dos pilas en el compartimento para pilas según las indicaciones de polaridad y deslice la tapa.
 - (2) Encienda el botón del láser. La luz del láser y el indicador se encenderán al mismo tiempo. Desprenderá un rayo flexible de láser rojo.
 - (3) Encienda el botón de micro-corriente BIO (2). El anillo de contacto de micro-corriente generará un haz de energía BIO que actuará sobre sus ojos para complementar la energía eléctrica de sus células.
 - (4) Ajuste el botón de intensidad de corriente según sus sensaciones. Es recomendable ajustarlo en grado II.
4. Métodos operativos de eliminación de arrugas del contorno de ojos (cierre los ojos durante todo el proceso)

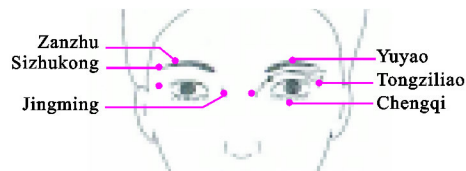

Zanzhu Yuyao
 Sizhukong Tongziliao
 Jingming Chengqi